

**AFT**  
Automatic Flexion



**Forsco Labs**  
Exclusive Distributor - HILL Laboratories

[WWW.FORSCOLABS.DE](http://WWW.FORSCOLABS.DE)

# HILL AFT™ MANUELLE DROPS

## MOTORISIERTE AUTOMATISCHE FLEXION

Die Hill AFT Flexionsliege ist ideal für Therapeuten, die eine voll ausgestattete automatische Flexion wünschen. AFT ist überraschend günstig für eine Liege mit variabler Geschwindigkeit, elektrischer Einstellung der Höhe und einer beeindruckenden Liste weiterer Standardfunktionen. AFT ist noch vielseitiger, wenn Sie die Optionen hinzufügen, um mit AFT Ihren spezifischen Bedürfnissen zu entsprechen.



Modell im Foto :  
Beige Basis  
Navy Polsterung

Modell im Foto :  
AFT-Liege mit mehreren Optionen




## STANDARDFUNKTIONEN

- Motorisierte Flexion mit variabler Geschwindigkeit
- 30 ° neigbare Kopfstütze (Kippen)
- Thoraxteil freigegeben und abschließbar
- Beckenabschnitt (seitliche Biegung und abschließbar von 0 bis 21 °)
- Abnehmbare Steuerleiste für seitliche Bewegung
- Knöchelstütze
- Einstellbare Griffstange für den Patienten
- Stoppschalter für den Patienten
- Elektrische Höhe durch zwei Pedale gesteuert
- Breite 60 cm
- Höhe 54 cm bis 74 cm (andere Höhen verfügbar)
- Schaumpolsterung - 6,5 cm - Standardmäßig (Flexibel oder fest auf Anfrage)
- Auswahl von 20 Farben für Polster
- Auswahl von 3 Farben für die Basis
- Ein Jahr Garantie auf Teile und Werkstattreparaturen



Einstellbare Höhe der AFT von 54 bis 74 cm

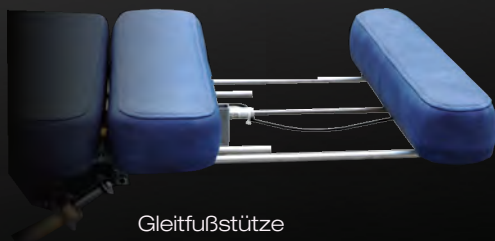

Gleitfußstütze



# AFT MANUELLE DROPS

Alle unten aufgeführten Funktionen sind Standard bei der AFT

**MOTORISIERTE AUTOMATISCHE FLEXION**

## VARIABLE GESCHWINDIGKEITSFLEXION.

Die HILL AIR-AFT Liege hat ein flexibles Bedienfeld am Ende der Liege, mit dem Sie die Biegungs-Geschwindigkeit von 1 bis 28 TPM einstellen können (Option: 30-Minuten-Timer kann ebenfalls hinzugefügt werden). Ein Schalter ermöglicht es Ihnen, die Liege in horizontaler oder geneigter Position anzuhalten. Bei der niedrigsten Flexionshöhe können Patienten leicht auf- und absteigen. Der AFT-Beckenabschnitt bewegt sich seitwärts und kann für die Flexion mit der Steuerleiste leicht manövriert werden. Der Abschnitt kann auch auf jeder Seite seitlich verschlossen werden.



Kippen



Seitliche Steuerleiste



Patientenstopptaste



Höhenverstellpedal



Thorax freigegeben



Patientengreifstange



Flexionssteuerung

## Hauptoptionen zur Vervollständigung und Personalisierung Ihrer AFT



Schrägstellung der Kopfstütze



Komplettes Skoliose-Korrekturpaket




Timer



Aufrechte und nach unten gerichtete Kopfstütze



Passender Hocker

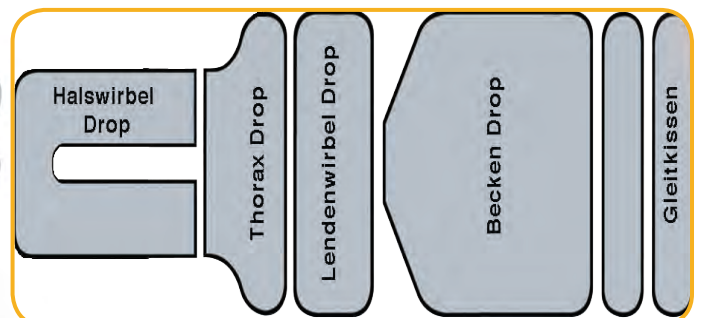

Andere zusätzliche Optionen auf [www.forscolabs.de](http://www.forscolabs.de)

# TECHNISCHE DATEN

## AFT Manuelle Drops

- AFT - Stromversorgung in 220-50Volt 4,8 Ampere.
- Hebekapazität - 204 kg
- Länge: 165 cm (erstreckt sich auf 188 cm), mit dem Cervical Drop: 170 bis 193 cm
- Breite: 60 cm
- Höhenbereich: 54 bis 74 cm (andere Höhen auf Anfrage erhältlich)
- Polsterungsdichte : Mittel als Standard, (auf Anfrage: weich oder hart)
- Auswahl von 20 Farben für Polster (siehe unten)
- Thermoplastische Farbe der Basis feuerfest, Anti-bakteriell
- Versandgewicht 113 -136 kg
- 1 Jahr Garantie auf Teile und Werkstattreparaturen


## POLSTERFARBEN



## FARBEN DER BASIS



## OPTIONAL POLSTER FINESSE®

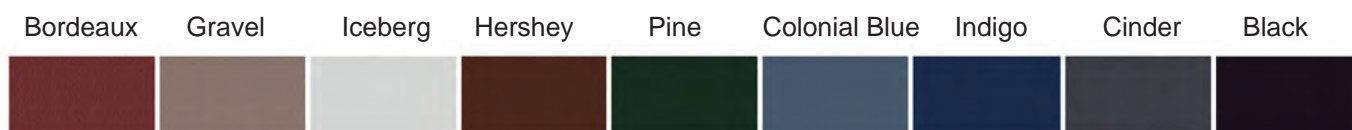

Die Boltaflex® Beschichtung mit Prefix™, ist wissenschaftlich entwickelt worden und gibt einen ausgezeichneten Schutz gegen Flecken und Kratzer. Sie ist garantiert gegen Platzen.

Farbtöne wie oben abgebildet können von den realen Farben abweichen.

Besuchen Sie [WWW.FORSCOLABS.DE](http://WWW.FORSCOLABS.DE), um Ihre Air-Flex-Liege zusammenzustellen und Ihr Online - Angebot zu erstellen.

Treten Sie in Kontakt mit einem unserer Mitarbeiter, der gerne alle Ihre Fragen beantworten wird.

**Forsco Labs**  
Exclusive Distributor - HILL Laboratories

149 avenue du Maine 75014 Paris, France  
Tel: +33 183 597 160 - Fax: +33 972 447 924  
contact@Forscolabs.de - [www.Forscolabs.de](http://www.Forscolabs.de)