

AFT
Automatic Flexion



Forsco Labs
Exclusive Distributor - HILL Laboratories

AIRAFIT

Auto-Flex with Air-Drops

▶ Reaktionsfreudig, sanft, schnell.

Ausgestattet mit dem Hill Air-Drop System * ermöglicht der Air-AFT dem Chiropraktiker vier Drops gleichzeitig auf dem Steuerpanel auszuwählen. Die Kissen werden sofort durch Betätigung einer der Fußleisten aktiviert.

Modell im Foto:
Schwarze Basis
Cinder Polsterung



Optionen im Foto:
Anhebbare Kopfstütze, verstellbare
Armlehnen mit Haltegriffen, Fußstan-
gen und Timer.

▼ STANDARDFUNKTIONEN

- Motorisierte Flexion mit variabler Geschwindigkeit
- Air-Drop Zervikal-, Thorax-, Lendenwirbel- und Becken
- Air-Drop Thorax freigebbar und abschließbar
- Kippbare Kopfstütze, 30 ° negativ / positiv (Kippen)
- Beckenabschnitt (seitliche Biegung und abschließbar von 0 bis 21 °)
- Abnehmbare Steuerleiste für seitliche Bewegung
- Knöchelstütze
- Armlehnen mit verstellbaren Griffstangen
- Stoppschalter für den Patienten
- Elektrische Höhe durch zwei Pedale gesteuert
- Breite 60 cm, Höhe 54 cm bis 74 cm (andere Höhen verfügbar)
- Schaumpolsterung - 6,5 cm Medium (Standard),
weich oder fest) auf Anfrage
- Auswahl von 20 Farben für Polster
- Wahl von 3 Farben für die Basis der Liege
- Ein Jahr Garantie auf Teile und Werkstattreparaturen

Wählen Sie einen bis vier Drops gleichzeitig auf dem Steuerpanel aus. Option eines zweiten Schaltkastens auf der gegenüberliegenden Seite.

AIR-AFT

Alle unten aufgeführten Funktionen sind Standard bei der AFT

MOTORISIERTE AUTOMATISCHE FLEXION

VARIABLE GESCHWINDIGKEITSFLEXION.

Die HILL AIR-AFT Liege hat ein flexibles Bedienfeld am Ende der Liege, mit dem Sie die Biegung-Geschwindigkeit von 1 bis 28 TPM einstellen können (Option: 30-Minuten-Timer kann ebenfalls hinzugefügt werden). Ein Schalter ermöglicht es Ihnen, die Liege in horizontaler oder geneigter Position anzuhalten. Bei der niedrigsten Flexionshöhe können Patienten leicht auf- und absteigen. Der AFT-Beckenabschnitt bewegt sich seitwärts und kann für die Flexion mit der Steuerleiste leicht manövriert werden. Der Abschnitt kann auch auf jeder Seite seitlich verschlossen werden.



Kippen



Seitliche Steuerleiste



Patientenstoppaste



Höhenverstellpedal



Air Drop Stange



Patientengreifstange



Druckluft Drops in standard

zervikal
Thorax
Lendenwirbel
Becken
Breakaway
Thorax freigegeben

Options principales pour compléter et personnaliser votre AIR-AFT



Schrägstellung der Kopfstütze



Aufrechte und nach unten gerichtete Kopfstütze



Komplettes Skoliose-Korrekturpaket



Timer



Passender Hocker

Andere zusätzliche Optionen auf www.forscolabs.de

TECHNISCHE DATEN

AFT Air Drops

- AFT - Stromversorgung in 220-50Volt 4,8 Ampere.
- Hebekapazität - 204 kg
- Länge: 165 cm (erstreckt sich auf 188 cm), mit dem Cervical Drop: 170 bis 193 cm
- Breite: 60 cm
- Höhenbereich: 54 bis 74 cm (andere Höhen auf Anfrage erhältlich)
- Polsterungsdichte : Mittel als Standard, (auf Anfrage: weich oder hart)
- Auswahl von 20 Farben für Polster (siehe unten)
- Thermoplastische Farbe der Basis feuerfest, Anti-bakteriell
- Versandgewicht 113 -136 kg
- 1 Jahr Garantie auf Teile und Werkstattreparaturen


POLSTERFARBEN



FARBEN DER BASIS



OPTIONAL POLSTER FINESSE®

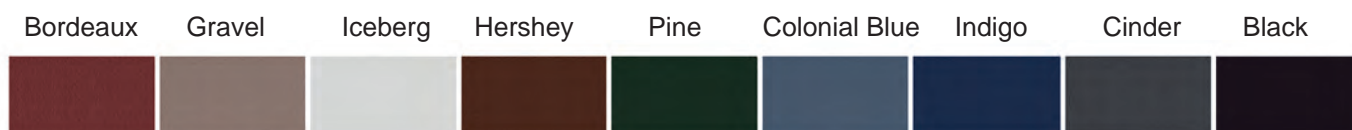

Die Boltaflex® Beschichtung mit Prefix™, ist wissenschaftlich entwickelt worden und gibt einen ausgezeichneten Schutz gegen Flecken und Kratzer. Sie ist garantiert gegen Platzen.

Farbtöne wie oben abgebildet können von den realen Farben abweichen.

Besuchen Sie WWW.FORSCOLABS.DE, um Ihre Air-Flex-Liege zusammenzustellen und Ihr Online - Angebot zu erstellen.

Treten Sie in Kontakt mit einem unserer Mitarbeiter, der gerne alle Ihre Fragen beantworten wird.

Forsco Labs
Exclusive Distributor - HILL Laboratories

149 avenue du Maine 75014 Paris, France
Tel: +33 183 597 160 - Fax: +33 972 447 924
contact@Forscolabs.de - www.Forscolabs.de