

HA90C



**Forsco Labs**

Exclusive Distributor - HILL Laboratories

[WWW.FORSCOLABS.DE](http://WWW.FORSCOLABS.DE)

# HILL 90c

## DIE REFERENZLIEGE

Das unten gezeigte Modell ist die meistverkaufte Konfiguration mit den folgenden Optionen: Kippen, Heben und Doppel Drop für die Kopfstütze, Thorax Drop, Lendenwirbel Drop, Becken Drop, versenkbare und gleitende Knöchelstütze.



Vorgestelltes Modell:  
Beige Basis – Oxblood Polster

KIPPEN



DOPPELTER DROP

STRAIGHT-DOWN / DROP-FORWARD



SEITLICH



ERHÖHTE




FLEXION



AXIAL



SCHIEBUNG / CBP

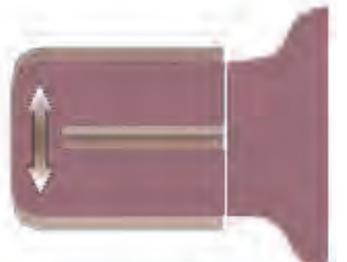

# HILL 90C

## OPTIONEN

### MANUELLE DROPS

Die 90C Liegen können mit maximal 4 manuellen Drops ausgestattet werden : Zervikal (vertikale und horizontale Bewegung), Thorax-, Lendenwirbel -und Becken.

### Abnehmbarer Thorax-Drop

#### ABNEHMBARER THORAX-DROP

Die Öffnung des Thoraxteils (Breakaway) ermöglicht einen Rückstoß des Thorax Einstellung der Öffnung mit einer Verriegelungskerbe bis zu 17 cm. Diese Funktion kann nicht mit einem Thorax- oder Lendenwirbel Drop kombiniert werden.

#### OPTIONEN THORAX / LENDENWIRBEL

##### THORAX DROP



Manueller Drop 90C ist aktiviert durch einen Griff «Easylift».

##### LENDENWIRBEL DROP



Manueller Drop 90C ist aktiviert durch einen Griff «Easylift».

##### LENDENWIRBEL DROP



Verkippen und Abstütze bei 15 cm. (nicht verfügbar mit abnehmbarem Thoraxteil).

##### THORAX ÖFFNUNG



Abstieg durch Scharniere und Verschlussriegel bei 17 cm.

##### ABNEHMBARE THORAXTEIL (BREAKAWAY)



Ermöglicht eine Thorax-Rücklaufbewegung und hat einstellbare Spannung.

#### OPTIONEN PELVEN

##### BECKEN DROP



Manueller Drop 90C ist aktiviert durch einen Griff «Easylift».

##### THORAX DROP



Verkippen und Abstütze bei 13 cm.

##### BECKEN ANGEHOVEN / COMBO DROP



Kombiniert die Erhöhung Beckenfunktion mit dem Becken Drop.

Das Standardbeckenkissen hat eine Kerbe, (Kissen ohne Kerbe auf Anfrage erhältlich). Alle H90C Drops sind einfach mit einem Griff auf beiden Seiten des Tisches zu aktivieren.

H90C ist mit Air-Drops erhältlich. Beim Modell Air-HA90C werden sie über eine Kontrollbox ausgewählt und mit Fuß Stangen aktiviert.

#### ANDERE OPTIONEN

##### VERSTELLBARE ARMLEH-



Höhenverstellbar für die Schulterstütze.

##### FUSSKISSEN KLAPPBAR



Der Fußteil lässt sich zur Behandlung kleinerer Patienten um 23 cm herunterklappen.

##### GLEITENDE KNÖCHELUN- TERSTÜTZUNG



Bis zu 20 cm in die Höhe verstellbar, bis 30 cm ausziehbar am Ende der Liege.

##### ROCKER PEDAL



Das Wippedal an der Basis auf beiden Seiten der Liege steuert die Höhe.

##### RÄDER



Damit kann die Liege leicht bewegt werden. Wird mit einem Fußhebel festgestellt.

# HILL 90C

## TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung: 7 Ampere. 220 Hz - 50 Hz
- Hebekapazität: 204 kg
- Standardbreite: 60 cm (Option 68,5, 76 cm)
- Standardlänge: 185 cm (Fußteil gefaltet 162 cm)
- Schiebbar Knöchelstütze : Abgenommen 155 cm,
- Zurückgezogen 162 cm, Ausgezogen 193 cm.
- Standardhöhe: von 55 bis 80 cm  
(Elektrische Einstellung der Höhe : 15s)
- Ein Jahr Garantie auf Teile und Werkstattreparaturen
- Polsterung Farbe: 20 Farben
- Thermoplastische Farbe der Basis feuerfest, Anti-bakteriell
- Höhe der Liege: 55 bis 80 cm
- Dicke: 6,5 cm
- Polsterungsdichte : Mittel,  
(auf Anfrage: weich oder hart)
- Versandgewicht: von 113 bis 136 kg.


## POLSTERFARBEN



## FARBEN DER BASIS



## OPTIONAL POLSTER FINESSE®

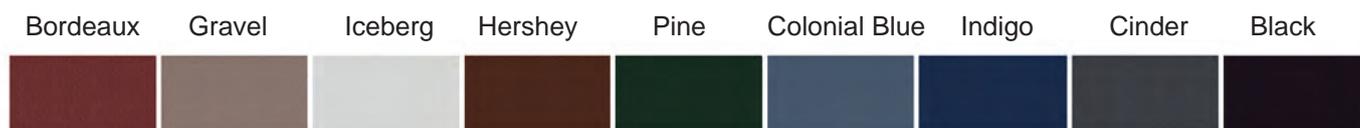

Die Boltaflex® Beschichtung mit Prefixx™, ist wissenschaftlich entwickelt worden und gibt einen ausgezeichneten Schutz gegen Flecken und Kratzer. Sie ist garantiert gegen Platzen.

Farbtöne wie oben abgebildet können von den realen Farben abweichen.

Besuchen Sie [www.forscolabs.de](http://www.forscolabs.de), um Ihre Air-Flex-Liege zusammenzustellen und Ihr Online - Angebot zu erstellen.

Treten Sie in Kontakt mit einem unserer Mitarbeiter, der gerne alle Ihre Fragen beantworten wird.

**Forsco**Labs  
Exclusive Distributor - HILL Laboratories

149 avenue du Maine 75014 Paris, France  
Tel: +33 183 597 160 - Fax:+33 972 447 924  
contact@Forscolabs.de - [www.Forscolabs.de](http://www.Forscolabs.de)